

保証書

持込修理

エイミー 電動歯ブラシ
AIM-OC04/AIM-OC04S

ご購入日 保証期間：お買い上げ日より1年間

お客様

お名前 TEL

ご住所 〒

販売店

修理メモ

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。本書は再発行しませんので、大切に保管してください。通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。販売店欄に記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

- 取扱説明書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。

- (1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷。
- (2) お買い上げ後の輸送、落下等による損傷。
- (3) 火災、浸水、不慮の事故、その他天災による損傷。
- (4) 一般家庭用以外（業務用）に使用された場合の故障または損傷。
- (5) 指定外電源（電圧、周波数）使用による損傷。

4. お客様の個人情報のお取扱いについて
お客様よりお知らせいただいた氏名、住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

ELECTRIC
TOOTH
BRUSH

エイミー 電動歯ブラシ

AIM-OC04/AIM-OC04S

取扱説明書 保証書付



発売元：株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5
<http://www.tsukamoto-aim.co.jp/>

2024年8月初版発行

一般家庭用

ELECTRIC TOOTH BRUSH

エイミー 電動歯ブラシ
AIM-OC04/AIM-OC04S

安全にお使いいただくために	2～4
各部の名前とはたらき	5
充電の仕方	6
使い方	7
お手入れについて	8
廃棄方法・リチウムイオン電池の取扱について	9
主な仕様	10
故障かな？と思ったら	10
保証とアフターサービス	11
保証書	裏表紙

このたびは、お買い上げいただきありがとうございました。
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
とくに「安全にお使いいただくために」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管し
てください。

安全にお使いいただくために

本製品は安全を十分に考慮して設計されていますが、電気製品は取り扱いを誤ると大きな事故につながる可能性があります。お使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

表示について



警告

誤った取扱いをしたときに「死亡または重傷^{※1}を負う可能性がある内容」を示します。



注意

誤った取扱いをしたときに「傷害^{※2}を負うことや、物的損害^{※3}が発生する可能性がある内容」を示します。

※1: 重傷とは、失明やけが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものをさします。

※2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

※3: 物的損害とは、家屋・家財・および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

安全記号について



中の絵や近くの方で、してはいけないこと(禁止)を示します。



中の絵や近くの方で、しなければならないこと(指示)を示します。



中の絵や近くの方で、注意を促す内容を示します。

使用者の体調に関する注意

警告



医師の治療を受けている人や、次のような症状のある人は、使用する前に医師と相談する

- 歯の治療を受けてる人
 - 歯周病の疑いのある人
 - 歯や歯ぐきの病気にかかっている人
- 症状を悪化させるおそれがあります。

注意



使用中、痛みや異常を感じたときは、ただちに使用をやめて医師に相談する

そのまま使い続けると症状が悪化し、事故やけがをおこすおそれがあります。



飲酒後は使用しない

事故やけがをおこすおそれがあります。

警告



改造・修理・分解をしない

事故やけがのおそれがあります。修理はお買い上げ販売店にご相談ください。



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電の原因になります。



自分で意思表示ができない人や、自分で操作できない人には使用させない

事故やけがのおそれがあります。



子供に使用させない

また、使用中は子供を近づけない

事故やけがのおそれがあります。



口腔内に傷、はれもの、湿疹などの異常があるときは、使用しない

口腔内を傷めるおそれがあります。



本製品を口腔洗浄以外の部位に使用しない

耳、目、鼻、喉などにすると組織を損傷するおそれがあります。

警告



電源プラグは根元まで確実に差し込む

感電や発熱による火災の原因になります。

注意



ご使用前には、必ず操作ボタンなどが正常に作動するか確認する

事故やけがのおそれがあります。



動かなくなったり、異常を感じた場合は、ただちに使用を中止する

漏電やショートなどによる感電や火災の原因になります。お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。



機器が故障した場合は、勝手に修理等せず、販売店又は製造販売元に連絡する



本体を落としたり、強い衝撃を与えない

火災や感電、故障の原因になります。



充電アダプタのコードに負荷をかけたり、傷つけたりしない

電源コードやプラグの誤った取り扱い、電源コードに負荷をかけたり、傷つけたりすることによる感電や火災の原因となります。次のことをお守りください。

- ・電源コードを加工したり傷つけたりしない。
- ・電源コードを熱器具に近づけない。
- ・電源コードの上に重いものを乗せたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
- ・電源コードが傷ついていたたり、電源コンセントへの差し込みがゆるんでいたたりするときは使用しない。
- ・電源コンセントから電源プラグを抜くときはコードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜く。
- ・電源コードを本製品に巻きつけない。
- ・電源コンセントや配線器具など、たこ足配線等で定格を超える使いかたはしない。
- ・コード類はねじれをほどいて保管する。

電源コードが破損した場合は、お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。

使用場所についての注意



ストーブなどの火気の近くで使用したり、ホットカーペットなどの暖房器具の上で使用しない

火災や事故、故障の原因になります。



室温35°C以上の場所や、直射日光のあたる場所で使用しない

本体内部の温度が上昇し、火災や事故、故障の原因になります。また変形や変質など本体の外装を傷めるおそれがあります。

保管についての注意



お手入れをするときは、必ず充電アダプタをコンセントから抜く

電源プラグがコンセントに差し込まれたままだと、火災や感電の原因になります。




長期間使用しなかったときは、使用前に動作の確認をする

内部部品が劣化している場合、事故やけがのおそれがあります。正常に動作しないときは、必ずお買い上げ販売店にご相談ください。

各部の名前とはたらき

●本体

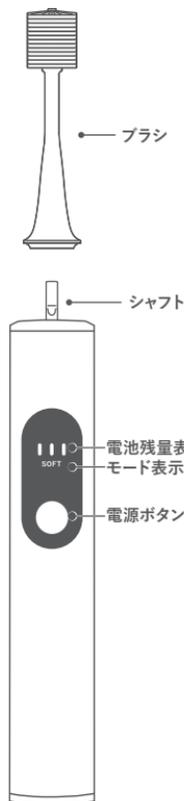


●消耗品の交換目安

ブラシ交換の目安
・衛生面を考慮して1～2か月で交換する事を推奨します

●充電アダプタ




●充電スタンド

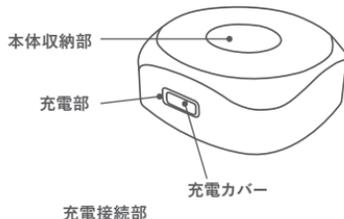

各モードボタンについて



充電お知らせ表示について

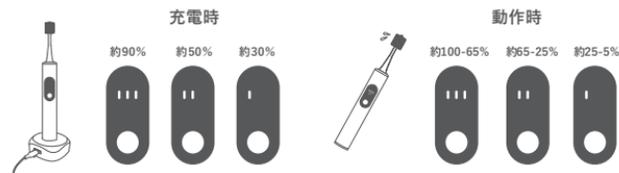


充電の仕方


- 1 充電スタンドの充電部カバーを開ける



- 2 充電アダプタの充電コネクタを充電部に差し込む

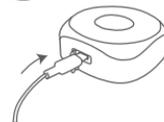

- 3 充電スタンドの本体収納部に本体を置いた後、充電アダプタの電源プラグをコンセントに差し込む
充電完了後は充電スタンドから本体を取り外してください

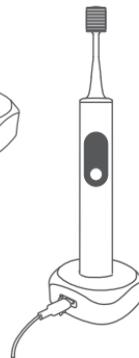

使い方

- ① ブラシと本体を矢印に合わせて装着します。



- ② 電源ボタンを短く押して電源を入れます。

- ③ モードを選択後10秒以内にもう一度短く電源ボタンを押すと動作モードが切り替わります。

お好みのモードを選択してください。

※モードを選択後10秒以内に電源ボタンを長押しすると電源が切れます。

※モードを選択後10秒以上経過すると電源ボタン短押しで電源が切れます。

- ④ ブラシを歯の表面に（軽く）当てます。

- ⑤ 少しづつゆっくり上下・左右に動かします。

- ⑥ モード選択してから2分経過すると自動で電源が切れます。
途中で止めるときは電源スイッチを押して、電源を切ります。
※30秒経過するごとに一時停止します。

- ⑦ ブラシを流水で洗浄します。



ご使用後のお手入れについて

お手入れのしかた

- ① 本体は水で洗った後、乾いた布で水気をよくふきとってください。
ベンジン、シンナーなど揮発性の薬品や熱湯は、プラスチックをいためますので、ご使用にならないでください。
- ② シャフトの差し込み口は、汚れが溜りやすいので、ご使用後、よく水洗いをしてください
- ③ 充電スタンドは、表面をぬれた布などでふいてください。
※水洗いはおさげください。

歯や歯ぐきを傷めないために

-  やに取り用・美白用などの研磨剤が多く含まれている歯磨き剤は使用しない
-  歯や歯ぐきを傷めないために・やに取り用・美白用などの研磨剤が多く含まれている歯磨き剤は使用しない
-  本体・プラスチック部分を歯に当てない
-  口腔内の感覚が弱い方は使用しない
-  **必ず守る**
歯周病の疑いがある人、治療中の歯や口腔内に気になる症状がある人は歯科医に相談の上、使用する。

廃棄方法・リチウムイオン電池の取扱について

地球環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで、各自治体の取り決めにしたがってください。



リチウムイオン電池は以下のことをしない

- 発熱や発火、破裂の原因になります。
- 火への投下、加熱をしない。
- くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない。
- ⊕と⊖を金属などで接触させない。
- ネックレス・ヘアピンなどと一緒を持ち運んだり保存しない。
- 火のそばや炎天下など高温の場所で放置しない。



リチウムイオン電池は乳幼児の手の届くところに置かない
万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師に相談する。



リチウムイオン電池の液が漏れたときは、素手で触れずに以下の処置をする

- 液が目に入ったときは、目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと医師に相談する。
- 液が体や衣服についたときは、きれいな水で十分洗い流したあと医師に相談する。



製品は分解しない
火災や感電、けがの原因になります。

- リチウムイオン電池以外にも、リサイクル可能な部品が含まれています。リチウムイオン電池以外の部品の廃棄に際しましては、お住まいの地域の条例などに従って処理してください。

- この製品には、リチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄またはリサイクルに際しては、当社のお客様相談窓口にお問い合わせください。



Li-ion20
リチウムイオン電池は
リサイクルへ

● 保管について

高温・低温の場所に放置や保管はしないでください。



乳幼児の手の届くところに置かない
付属品や部品などの誤飲による事故やけがのおそれがあります。

主な仕様

商品名 / 型番	ELECTRIC TOOTH BRUSH AIM-OC04/AIM-OC04S
充電電源	AC100V ~ 240V 50/60Hz 0.2A DC5V 1A
消費電源	約 3W (充電時)
充電方式	電磁誘導方式
充電時間	(約) 360 分
連続使用時間	(約) 150 分使用可能 /NOMAL モード使用時
使用電池	リチウムイオン電池 (DC3.7V 800mAh)
オート OFF	(約) 2 分
コース	3 コース (ノーマル・ソフト・パルス)
防水機能	IPX 7 (本体)
外形寸法	(約) 幅 27 × 奥行 27 × 高さ 248 mm (ブラシ部含む)
質量	(約) 136g(ブラシ部、AC アダプター、充電台含まず)
材質	本体：アルミ ブラシ部：PP (柄)、ナイロン (毛)
原産国	中国製

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、もう一度次の項目をお確かめください。それでも調子が悪い場合はただちに使用を中止し、お買い上げ販売店、または当社にお問い合わせください。

● こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
● スイッチを入れても、動作しない。	● 充電が不足している。	● 充電をする。(P6 参照)
● 振動が弱い。	● 充電が不足している。	● 充電をする。(P6 参照)

